

Maxima® by HENRY SCHEIN®

900-1570

MAXIMA® OIL SPRAY

Universal spray for handpieces
Degreases, Cleans and Lubricates

Aerosol Universale para piezas de mano y contra-ángulos

- Desengrasa, Limpia y lubrica

Vaporisation Universale pour turbines, pièce à main et contre-angles

- Dégraisse, nettoie et lubrifie

HS-Universal Spray für Hand- und Winkelstücke

- Entfettet, reinigt und ölt

Spray universale per manipoli e contrangoli

- Sgrassa, pulisce e lubrifica

Universele Spray voor hand- en hoekstukken

- Ontvet, reinigt en smeert

① Spray the instruments before each autoclave-sterilization, in any case 2 times daily for about 2 sec.




Lubricar los instrumentos antes de esterilizar por autoclave o 2 veces diarias durante aprox. 2 seg (vea el dibujo).

Lubrifier les instruments pendant au moins 2 seconde, avant chaque passage à l'autoclave, sinon 2 fois parjour.

Vor jeder Autoklav-Sterilisation, bzw. 2 mal täglich die Bohrantriebe ca. 2 Sekunden lang durchsprühen.

Spruzzare la parte motrice per circa 2 secondo, due volte al giorno e prima di ogni sterilizzazione in autoclave.

Smeer de instrumenten voor iedere autoclaaf-sterilisatie, en tenminste 2 maal per dag gedurende 2 sec.

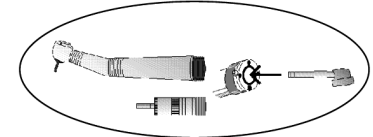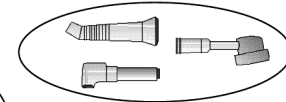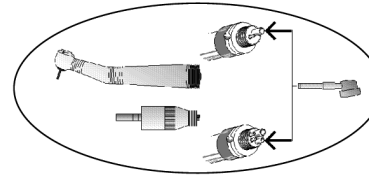

H222 - Extremely flammable aerosol. Pressurized container. Keep out of the reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

H222 - Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Emplear únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Protéjase de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Conserver hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Recipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

H222 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen.

H222 - Aerosol altamente infiammabile. Recipiente sotto pressione. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme /superfici riscaldate - Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte di ignizione. Recipiente sotto pressione: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

MADE IN GERMANY/Fabricado en Alemania
Fabriqué en Allemagne/Hergestellt in Deutschland
Gefabriceerd in Duitsland/Prodotto in Germania

Distributed by (in US only)
HENRY SCHEIN INC.
(manufacturer)
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

EC REP

HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD.
MEDCARE HOUSE, CENTURION CLOSE
GILLINGHAM BUSINESS PARK
GILLINGHAM, ME8 0SB U.K.
www.henryscheinbrand.com

Rev. 2014/02

500 ml

650 3 e



see imprint
ver la fecha impresa
voir impression
siehe Aufdruck
vedi iscrizione
zie opdruk



Danger/Peligro/Danger/
Gefahr/Gevaar/Pericolo

