


KaVo QUATTROcare PLUS

Gute Pflege zahlt sich aus.

Die günstige Lösung für optimale Pflege
und langfristige Werterhaltung.

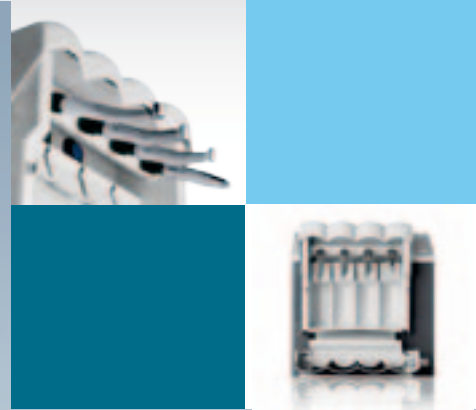

KaVo. Dental Excellence.

Vierfach perfekte Pflege. Schnell und komfortabel.

So einfach in der Anwendung.

Im Praxisalltag bleibt wenig Zeit für die Pflege Ihrer hochqualitativen Instrumente. Weder für Sie noch für Ihr Praxisteam. Es ist daher umso wichtiger, auf ein durchdachtes Pflegesystem vertrauen zu können, das intuitiv und schnell zu bedienen ist. Instrumente aufstecken. Frontklappe schließen. Starten. Vier auf einmal. Im Handumdrehen fertig.

Vier Instrumente in einer Minute.

Einfach per Knopfdruck. Einfach vollautomatisch. KaVo QUATTROcare PLUS bietet ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit. Dabei besticht KaVo QUATTROcare PLUS durch einfachste Handhabung. Sie stecken bis zu vier Instrumente gleichzeitig auf die vier Pflegekupplungen, schließen die Frontklappe und starten das Pflegeprogramm. Nach Programmende ist das KaVo QUATTROcare PLUS sofort wieder für den nächsten Pflegezyklus betriebsbereit.

So einfach geht's.

Optimale Pflegequalität für vier Instrumente in nur einer Minute:
Die Arbeitsschritte mit KaVo QUATTROcare PLUS.

- 1 Instrumente aufstecken. Zum Aufstecken der Instrumente stehen Ihnen standardmäßig eine MULTIflex-Pflegekupplung sowie drei INTRAmatic-Kupplungen zur Verfügung.
- 2 Frontklappe schließen. Und schon kann es losgehen.
- 3 Startknopf drücken. Die vollautomatische Pflege von bis zu vier Instrumenten dauert nur 1 Minute.
- 4 Fertig. Instrumente entnehmen.



**NUR 1
MIN!**

Handhabung und Programmablauf – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Keine Bedienungsfehler dank einfacher und sicherer Handhabung
- Pflegesicherheit durch automatischen Programmablauf
- Wiederverfügbarkeit der Instrumente dank kurzer Zyklusdauer schon nach einer Minute

KaVo QUATTROcare PLUS:
einfach – schnell – komfortabel.



Optimale Pflege.

Der Unterschied liegt im Detail.

Durch das Aufschäumen der Reinigungskomponente des KaVo QUATTROcare plus Pflegesprays werden die anorganischen Rückstände im Innern der Instrumente gelöst, per Druckluft ausgeblasen und somit die Voraussetzungen für die optimale Öl-Pflege geschaffen.

Um jedoch die RKI-Anforderungen einer validierten Innenreinigung zu erfüllen, ist für Instrumente der Risikoeinstufung 'semi-kritisch B' eine vorherige manuelle Intensiv-Reinigung mit KaVo CLEAN-/DRYSpray erforderlich. Für 'kritisch-B'-Instrumente ist eine maschinelle validierte Innenreinigung (z. B. im Reinigungs- und Desinfektionsgerät - RDG) erforderlich, die dann vor der Sterilisation im Autoklave durch die vorbildliche Pflege im KaVo QUATTROcare PLUS optimal ergänzt wird. Die Schnelligkeit des KaVo QUATTROcare PLUS entlastet nicht nur Ihren Praxisablauf, sondern gibt Ihnen auch die Sicherheit der perfekten Pflege. Die Lebensdauer Ihrer Instrumente wird es Ihnen danken.

Durch die Einzelplatz-Dosierautomatik wird sichergestellt, dass jedes Instrument mit der für seine Bauart erforderlichen Öl-Menge gepflegt wird. Dadurch wird unnötiger Verbrauch an Pflegeöl vermieden und die optimalen Laufeigenschaften der Instrumente sichergestellt. KaVo QUATTROcare PLUS ist universell. Das heißt: Sie können sowohl Ihre hochqualitativen KaVo Instrumente mit KaVo QUATTROcare PLUS pflegen, als auch Instrumente aller gängigen Hersteller.

Konsequent effizient in der Pflege.


Langlebigkeit ist nicht allein eine Frage der Produktqualität, sondern auch der darauf abgestimmten Pflege. KaVo hat mit dem KaVo QUATTROcare-Pflegesystem einen weltweiten Maßstab in der Effizienz der Instrumenten-Pflege gesetzt. Das innovative KaVo QUATTROcare PLUS-Pflegesystem ist unvergleichlich gründlich, wirtschaftlich und einfach zu bedienen. Perfekt für alle Ihre Instrumente, die täglich im Praxiseinsatz sind.

KaVo QUATTROcare PLUS ist standardmäßig mit der innovativen Purgung-Funktion ausgestattet. Hierbei werden die Getriebe- und Spraykanäle zusätzlich mit Druckluft beaufschlagt und durchgeblasen, so dass evtl. überschüssige letzte Ölreste verschwinden und die KaVo Instrumente bis ins kleinste Detail gepflegt sind.

Integriertes Spannzangen-Pflegeprogramm.

Die einmal wöchentliche Reinigung und Pflege der Spannzangen Ihrer Instrumente sichert deren Haltekraft, Funktionssicherheit und lange Lebensdauer

1. Spannzangen-Pflegeadapter auf MULTIflex-Kupplung aufstecken
2. Spannzange auf Pflegeadapter aufsetzen
3. Programmtaste Spannzange drücken

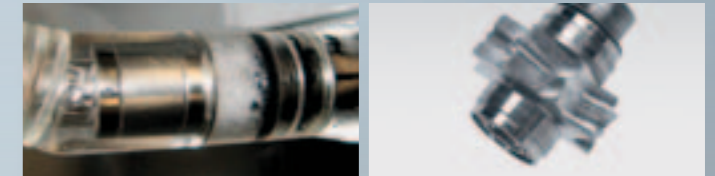

Der KaVo QUATTROcare Effekt. Kraftvolle Expansion des KaVo QUATTROcare plus-Pflegesprays im Innern der Instrumente löst und entfernt organische Rückstände.

Effizienz in der Praxis. KaVo SUPER-torque LUX 650 B, gepflegt mit KaVo QUATTROcare-Pflegesystem. Sieben Jahre im täglichen Praxiseinsatz ohne Ausfall oder Austausch des Läufers. Immer optimal gepflegt – immer betriebsbereit.



EXZELLENT.



Pflege und Effizienz – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Optimale Pflege durch KaVo QUATTROcare plus-Pflegespray
- Hohe Effizienz durch perfekte Abstimmung auf tägliche Praxisanforderungen

KaVo QUATTROcare PLUS:
optimal gepflegt – hocheffizient.



Günstig in der Anschaffung. Sparsam im Verbrauch.



Die Vorteile liegen auf der Hand.

Sie legen Wert auf Instrumente in Spitzenqualität. KaVo QUATTROcare PLUS sorgt dafür, dass Ihre Instrumente nichts an Präzision und Wert verlieren. Denn nur mit perfekt gepflegten und anschließend hygienisch wiederaufbereiteten Instrumenten lassen sich Kosten dauerhaft sparen und perfekte Ergebnisse erzielen.

Die Einzelplatz-Dosierautomatik und die Belegungserkennung der Pflegeplätze des KaVo QUATTROcare PLUS garantieren die exakt notwendige Dosierung des KaVo QUATTROcare plus Pflegesprays. Überschüssiger Verbrauch und damit unnötige Kosten können nicht entstehen.

Kostengünstige Pflege – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Nur eine Minute Pflegezyklus für vier Instrumente
- Programmgesteuerter, automatischer Pflegeablauf
- Optimale Öl-Pflege durch Einzelplatz-Dosierautomatik
- Einfache Handhabung verhindert Pflegefehler
- Ausblasen der Getriebe- und Spraykanäle durch Purgung-Funktion
- Kein Austritt von Restöl nach der Pflege
- Basisbestückung mit vier Pflegekupplungen (1 x MULTIflex / 3 x INTRAMatic)
- Universelle Verwendbarkeit (Adapter für alle gängigen Fabrikate lieferbar)
- Modernes und ergonomisches Design

KaVo QUATTROcare PLUS:
einfach – universell – sparsam.

REINIGUNG
+
PFLEGE
=



Technische Daten

Abmessungen:


Breite	35 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	38 cm

Technische Details:

Gewicht	10 kg
Netzspannung	100 – 240 V
Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaugnahme	ca. 24 W
Druckluftanschluss	4 – 6 bar
Druckluftverbrauch	ca. 50 NI/min

Aufstellbedingungen:

- Gute Raumbelüftung
- keine direkte Sonneneinstrahlung

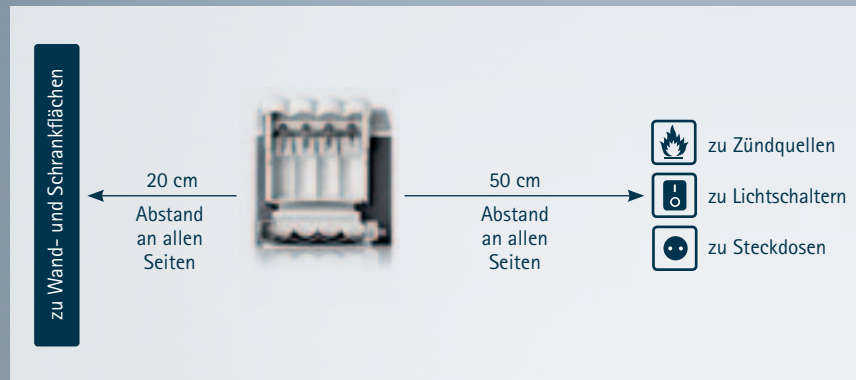

Zubehör

Produkt	Mat.-Nr.	Produkt	Mat.-Nr.
Pflegekupplung INTRAmatic	0.411.7981	Pflegekupplung YOSHIDA Turbinen mit Licht	1.000.7403
Pflegekupplung MULTIflex	0.411.7991	Pflegekupplung YOSHIDA Turbinen ohne Licht	1.000.7585
Pflegekupplung Köpfe	0.411.7941	Pflegekupplung MIDWEST Low Speed	1.000.8459
Pflegekupplung COMFORTdrive	1.005.1707	Pflegekupplung NSK Turbinen	1.000.8786
Pflegeadapter SIRONA TE Instrumente	1.000.1003	Pflegekupplung OSADA Turbinen	1.000.8858
Pflegekupplung SIRONA T1 Turbinen	1.000.7156	Pflegekupplung Borden 2-Loch	1.002.1217
Pflegekupplung BIEN-AIR	1.001.7860	QUATTROcare Plus Spray (Pck. mit 6 Dosen)	1.005.4525
Pflegekupplung W&H	1.001.7888		



KaVo. Dental Excellence.