



# SONICflex<sup>®</sup> Spitzenbuch.




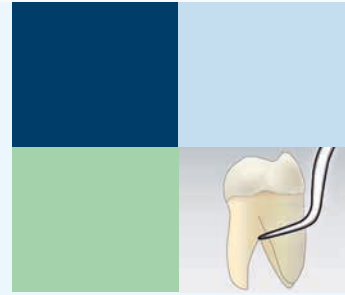


scaler | paro | implant | clean | rootplaner

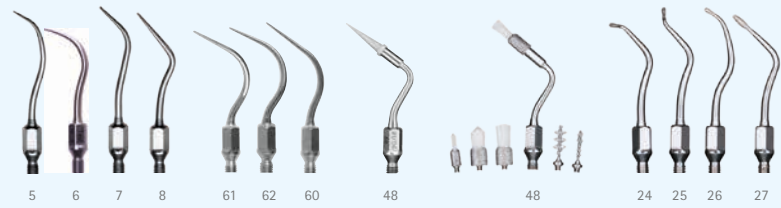


micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

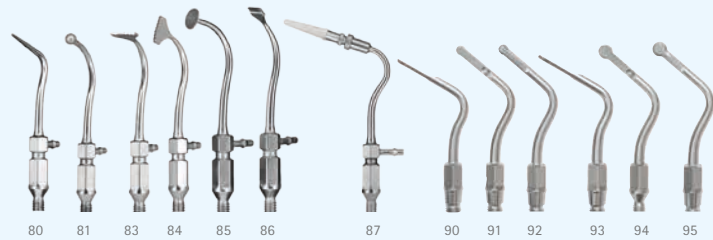

bone | crown extension

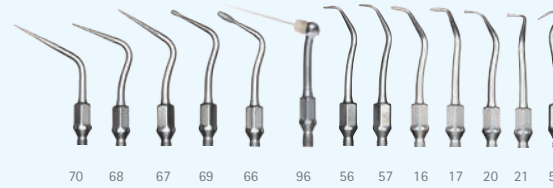

endo | retro

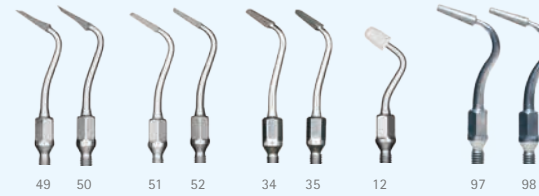

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown

Durch die umfassenden Möglichkeiten, die Sie mit SONICflex haben, wird es schon in Kürze eines Ihrer am meisten eingesetzten Instrumente.

Dank zahlreicher Spitzen stellt es sich exakt auf Ihren Bedarf ein.

- Mehr Spitzen und damit mehr Einsatzmöglichkeiten als alle anderen Airscaler
- Über 50 verschiedene Spitzen
- Für sämtliche Anwendungsbereiche
- Die Grundlage für eine erfolgreiche minimalinvasive Behandlung



# SONICflex® Instrumentenübersicht.

## KaVo **master** series



*Schneller komfortabler Spitzenwechsel - nur eine Umdrehung auch mit Anschluss für Sirona Kupplungen*

## KaVo **expert** series



## KaVo **smart** series



### Ihr täglicher Vorsprung in Sachen Leistungsstärke.

Mit Ihrem KaVo SONICflex verfügen Sie über den stärksten und leisesten Aircaler seiner Klasse. Er ist mit Sicherheit das Instrument mit dem breitesten Einsatzspektrum. Er unterstützt Sie tatkräftig mit einstellbaren Leistungsstufen, je nach Indikation – stark und präzise.

### Überlegene Technik – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- In drei Stufen regulierbare Leistung – optimale Arbeitsbedingung bei jeder Indikation
- Wesentlich leiser als vergleichbare Anbieter (bis zu 15 dB) – Gesundheitsschutz für Praxisteam und Patienten
- Keine Zusatzgeräte notwendig, einfach auf die KaVo MULTIflex oder Sirona Kupplung stecken – ganz ohne lästiges Kabelgewirr
- Beste Ausleuchtung: 25.000 Lux – für entspannte Sicht ohne Ermüdung der Augen
- Sprichwörtliche KaVo-Qualität – SONICflex 2008 L ist bereits die dritte Scaler-Generation bei KaVo, 25 Jahre Wissen und Erfahrung sind darin gebündelt

**SONICflex scaler Spitze Nr. 5**

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem Zahnstein  
Form: Universal



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



**0.571.5171**  
**1.005.8949**

**SONICflex scaler Spitze Nr. 8**

Behandlung: zum Entfernen von supra- und subgingivalen Zahnstein  
Form: Perio, extra lang



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



**0.571.5371**  
**1.006.1953**

**SONICflex scaler Spitze Nr. 6**

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem, supragingivalen Zahnstein  
Form: Sichel



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



**0.571.5181**  
**1.005.8950**

**SONICflex scaler Spitze Nr. 7**

Behandlung: zum Entfernen von großflächigem, supragingivalen Zahnstein  
Form: Perio



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




**0.571.5191**  
**1.005.8951**

**SONICflex scaler Spitze Nr. 48**

Behandlung: Belagsentfernung, Fissurenreinigung, Kavitäten- und Kronenstumpfreinigung  
Form: verschiedene Aufsätze, Einweg Bürsten



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS  
clean Bürste Nr. 1  
clean Bürste Nr. 2  
clean Bürste Nr. 3  
clean Bürste Nr. 4  
clean Bürste Nr. 5  
clean Bürste Nr. 6  
Spitze Nr. 48  
Spitze Nr. 48 A

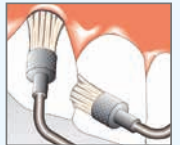

**0.571.0001**  
**1.006.2026**  
**0.571.0402**  
**0.571.0412**  
**0.571.0422**  
**0.571.0432**  
**0.571.0472**  
**0.571.0482**  
**0.571.0401**  
**1.006.1982**

Prophylaxe

### SONICflex paro Spitze Nr. 60

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe;  
Für Frontzahnbereich, Glattflächen

Form: lange, gerade Spitze - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7402  
1.006.1934

### SONICflex paro Spitze Nr. 61

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe;  
Für Prämolaren, Molaren

Form: abgewinkelte Spitze, **links** - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7412  
1.006.1935

### SONICflex paro Spitze Nr. 62

Behandlung: schonende Taschenreinigung in der PA Therapie; effektive Taschenreinigung bis zu 9 mm Tiefe;  
Für Prämolaren, Molaren

Form: abgewinkelte Spitze, **rechts** - abgerundete Oberfläche



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7422  
1.006.1936

### SONICflex implant Spitze

Behandlung: Effektives Entfernen von subgingivalen Belägen und Konkrementen bei Implantaten

Form: keilförmige Spitzen, Einweg-Kunststoffansatz (PEEK)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS  
Einweg Kunststoffansatz ( 30 St.)

1.003.8167  
1.006.2027  
1.003.8168

Parodontologie

**SONICflex rootplaner Spitze Nr. 24**

Behandlung: für schwer zugängliche Furkationen, ermöglicht auch bei geschlossener Zahnreihe den Zugang zu den approximalen Furkationseingängen

Form: kontrawinkelige Knospe, klein, **links**, Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621  
1.006.1957

**SONICflex rootplaner Spitze Nr. 27**

Behandlung: effektive Reinigung von Glattflächen und Konkavitäten

Form: extra lang perio, Knospe, **groß**; Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651  
1.006.1963

**SONICflex rootplaner Spitze Nr. 25**

Behandlung: für schwer zugängliche Furkationen, ermöglicht auch bei geschlossener Zahnreihe den Zugang zu den approximalen Furkationseingängen

Form: kontrawinkelige Knospe, klein, **rechts**; Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631  
1.006.1959

**SONICflex rootplaner Spitze Nr. 26**

Behandlung: effektive Reinigung von Glattflächen und Konkavitäten

Form: universal, Knospe, **klein**; Diamantierung D25



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641  
1.006.1961

Parodontologie

**SONICflex micro Spitze Nr. 30**

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies  
 Form: kleine Halbkugel, **mesial**, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.6811**  
**1.006.1969**

**SONICflex micro Spitze Nr. 33**

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies  
 Form: große Halbkugel, **distal**, Diamantierung D46

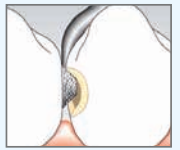


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.6821**  
**1.006.1975**

**SONICflex micro Spitze Nr. 31**

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies  
 Form: kleine Halbkugel, **distal**, Diamantierung D46

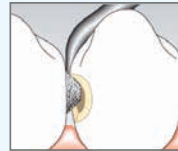

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.6801**  
**1.006.1971**

**SONICflex bevel Spitze Nr. 58**

Behandlung: proximale Kavitätenränder werden abgeschragt  
 Form: **mesial**, Diamantierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.7392**  
**1.006.1988**

**SONICflex micro Spitze Nr. 32**

Behandlung: minimalinvasive Therapie bei beginnender Karies  
 Form: große Halbkugel, **mesial**, Diamantierung D46

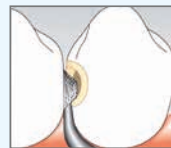

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.6831**  
**1.006.1973**

**SONICflex bevel Spitze Nr. 59**

Behandlung: proximale Kavitätenränder werden abgeschragt  
 Form: **distal**, Diamantierung D46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**0.571.7382**  
**1.006.1990**

Minimalinvasiv

**SONICflex seal Spitze Nr. 45**

Behandlung: minimalinvasives Aufbereiten von Fissuren, schmerzfreies Aufziehen von Fissuren  
 Form: konisch, gerade Spitze Ø 0,5 mm, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323  
 1.007.1506

**SONICflex carieux TC Spitze Nr. 71**

Behandlung: schichtweise Entfernung des Hauptteils der kariösen Substanz  
 Form: Kugelform, Ø 1,0 mm, Hartmetall



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362  
 1.006.2002

**SONICflex carieux D Spitze Nr. 42**

Behandlung: substanzschonende, sonoabrasive Kariesexkavation fein  
 Form: Kugelform, Ø 0,8 mm, Diamantierung D 64



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105  
 1.006.1980

**SONICflex carieux TC Spitze Nr. 72**

Behandlung: schichtweise Entfernung des Hauptteils der kariösen Substanz  
 Form: Kugelform, Ø 1,4 mm, Hartmetall




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363  
 1.006.2004

**SONICflex carieux D Spitze Nr. 43**

Behandlung: substanzschonende, sonoabrasive Kariesexkavation fein  
 Form: Kugelform, Ø 1,2 mm, Diamantierung D 64

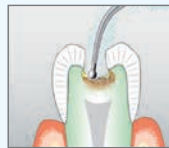

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7167  
 1.006.1981


Minimalinvasiv



**SONICflex prep gold Spitze Nr. 49 mesial**

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich nach der rotierend durchgeführten „Grobpräparation“; dadurch ist eine bessere zahntechnische Restauration möglich

Form: **mesial**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60° zervikal - 30°, Diamantierung D 46

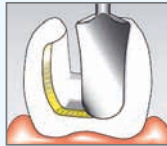

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212  
1.006.1983

**SONICflex prep ceram Spitze Nr. 52**

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich, harmonische Übergänge der zervikalen und lateralen Randbereiche

Form: **distal**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln, lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272  
1.006.1986

**SONICflex prep gold Spitze Nr. 50 distal**

Behandlung: präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich nach der rotierend durchgeführten „Grobpräparation“, dadurch ist eine bessere zahntechnische Restauration möglich

Form: **distal**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60°, zervikal - 30°, Diamantierung D 46

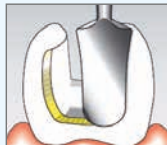

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222  
1.006.1984

**SONICflex prep ceram Spitze Nr. 51**

Behandlung: Präzise Präparation verschiedener Kantenwinkel im Randbereich, harmonische Übergänge der zervikalen und lateralen Randbereiche

Form: **mesial**, Spitzen mit definierten Kantenwinkeln: lateral - 60°, zervikal - 75°, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7262  
1.006.1985

Prothetik

**SONICflex prep CAD / CAM Spitze Nr. 34**

Behandlung: perfekte Abstimmung der Kavitätenpräparation auf arbeitstechnische Prozesse in CAD-CAM-Systemen

Form: **mesial**, lateraler Winkel 30°, zervikaler Winkel 90°, Diamantierung D 46

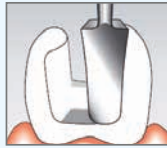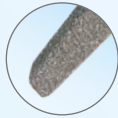


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**1.002.1984**  
**1.006.1977**

**SONICflex prep CAD / CAM Spitze Nr. 35**

Behandlung: perfekte Abstimmung der Kavitätenpräparation auf arbeitstechnische Prozesse in CAD-CAM-Systemen

Form: **distal**, lateraler Winkel 30°, zervikaler Winkel 90°, Diamantierung D 46

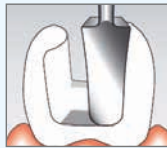


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**1.002.1986**  
**1.006.1979**

**SONICflex stripping Spitze Nr. 73**

Behandlung: Separation vor Beginn der Kronenstumpfpräparation  
Abrundung scharfer Übergänge am approximalen Präparationsgrenzverlauf im Rahmen der Kavitätspräparation  
Anatomische Ausgestaltung der approximalen Flächen von Composite – Füllungen  
Approximale Schmelzreduktion im Rahmen der Kieferorthopädie (z.B. bei Invisalign Anwendung)

Form: flach, mesial diamantiert (D25)

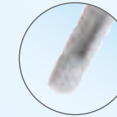

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**1.011.2993**  
**1.011.2994**

**SONICflex stripping Spitze Nr. 74**

Behandlung: Separation vor Beginn der Kronenstumpfpräparation  
Abrundung scharfer Übergänge am approximalen Präparationsgrenzverlauf im Rahmen der Kavitätspräparation  
Anatomische Ausgestaltung der approximalen Flächen von Composite – Füllungen  
Approximale Schmelzreduktion im Rahmen der Kieferorthopädie (z.B. bei Invisalign Anwendung)

Form: flach, distal diamantiert (D25)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**1.011.2995**  
**1.011.2996**

### SONICflex shaping Spitze Nr. 75

Behandlung: Separation vor Beginn der Kronenstumpfpräparation  
 Abrundung scharfer Übergänge am approximalen Präparationsgrenzverlauf im Rahmen der Kavitätspräparation  
 Anatomische Ausgestaltung der approximalen Flächen von Composite - Füllungen  
 Approximale Schmelzreduktion im Rahmen der Kieferorthopädie (z.B. bei Invisalign Anwendung)

Form: gewölbt, mesial diamantiert (D25)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997  
 1.011.2998

### SONICflex shaping Spitze Nr. 76

Behandlung: Separation vor Beginn der Kronenstumpfpräparation  
 Abrundung scharfer Übergänge am approximalen Präparationsgrenzverlauf im Rahmen der Kavitätspräparation  
 Anatomische Ausgestaltung der approximalen Flächen von Composite - Füllungen  
 Approximale Schmelzreduktion im Rahmen der Kieferorthopädie (z.B. bei Invisalign Anwendung)

Form: gewölbt, distal diamantiert (D25)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999  
 1.011.3000

### SONICflex cem Spitze Nr. 12

Behandlung: schonendes Einsetzen von Inlays  
 Form: abgerundete Kunststoffkappe



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS  
 CEM Aufsatz



0.571.5431  
 1.006.2021  
 0.571.7142

### SONICflex crown prep Spitze Nr.97

\*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: Kronenstumpfpräparation - Ideal für diese Indikation ist die Kombination rotierender Kronenstumpf- Präparationsinstrumente und formgleicher Schallspitzen. Hohlkehlpäparation.

Form: Radius, Diamatierung D46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383  
 1.008.6384

### SONICflex crown prep Spitze Nr.98

\*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: Kronenstumpfpräparation - Ideal für diese Indikation ist die Kombination rotierender Kronenstumpf- Präparationsinstrumente und formgleicher Schallspitzen. Stufenpräparation.

Form: Flach, Diamatierung D46




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S

1.008.6385  
 1.008.6386

Prothetik

**SONICflex retro Spitze Nr. 56**

Behandlung: Aufsuchen / Finden des Wurzelkanals.  
Wesentliche Arbeitserleichterung einer echten retrograden Kavitätenpräparation  
Form: extrem schmale zylindrische Spitze, **links**, Diamantierung D 46

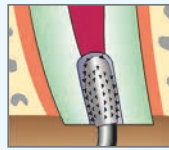


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322  
1.006.2040

**SONICflex retro Spitze Nr. 17**

Behandlung: Präparation des Wurzelkanals, deutlich erleichtertes Zugang bei starker Wurzelkrümmung  
Form: **rechts**, kleiner Zylinder, Diamantierung D 64

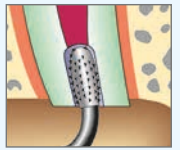


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581  
1.006.2035

**SONICflex retro Spitze Nr. 57**

Behandlung: Aufsuchen / Finden des Wurzelkanals.  
Wesentliche Arbeitserleichterung einer echten retrograden Kavitätenpräparation  
Form: schmale zylindrische Spitze, **rechts**, Diamantierung D 46

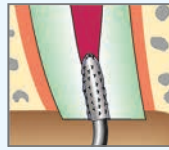


Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332  
1.006.2041

**SONICflex retro Spitze Nr. 20 und Nr. 21**

Behandlung: Präparation des Unterschnitts. Achsengerechte Wurzelkanalaufbereitung bei minimalem Knochendefekt  
Form: birnenförmig, **klein, links** (Nr. 20), **rechts** (Nr. 21), Diamantierung D 64

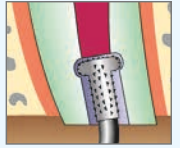

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521  
1.006.2037



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561  
1.006.2038

**SONICflex retro Spitze Nr. 16**

Behandlung: Präparation des Wurzelkanals, deutlich erleichtertes Zugang bei starker Wurzelkrümmung  
Form: **links**, kleiner Zylinder, Diamantiert D 64



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541  
1.006.2036

**SONICflex retro Spitze Nr. 55**

Behandlung: für Wurzeln, deren Apices stark nach oral geneigt sind  
Form: Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342  
1.006.2039

Wurzelspitzenresektion

**SONICflex endo Spitze Nr. 66**

Behandlung: Ausgestaltung der Zugangskavität, Entfernung von Überhängen  
 Form: Knospe, **groß**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


**1.000.5825**  
**1.006.1992**

**SONICflex endo Spitze Nr. 67**

Behandlung: Erweiterung größerer Kanäle  
 Form: konisch **125°**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

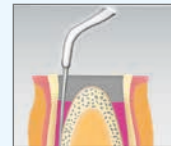

**1.000.5822**  
**1.006.1994**

**SONICflex endo Spitze Nr. 68**

Behandlung: Erweiterung größerer Kanäle  
 Form: konisch **112°**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

**1.000.5823**  
**1.006.1996**

**SONICflex endo Spitze Nr. 69**

Behandlung: Entfernen von Resten der Wurzelkanalfüllung  
 Form: Knospe, **klein**, Diamantierung D 46



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



**1.000.5827**  
**1.006.1998**

**SONICflex endo Spitze Nr. 70**

Behandlung: für besonders lange und weite Kanäle  
 Form: konisch **117°**, Diamantierung D 25  
 vorderer Bereich ist nicht diamantiert



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



**1.000.5821**  
**1.006.2000**

**SONICflex Spitze Endo clean Nr. 96**

\*ab 16. Mai erhältlich

Behandlung: zur Wurzelkanalspülung, zum Entfernen von Debris und smear layer sowie Steigerung der antibakteriellen Spüllösung  
 Form: 105° bzw. 75° Winkel



Bestellnummer: passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS  
 SONICflex Endo clean set A **1.007.1142**  
 SONICflex Endo clean Spitze A **1.008.5164**  
 passend für SONICflex 2000 N / L und 2003 / L  
 SONICflex Endo clean Spitze **1.008.5163**  
 SONICflex Endo clean set **1.006.2045**

Endo clean Nadeln für SONICflex 2000 N / L, 2003 und 2008  
 SONICflex Endo clean 015 weiß **1.006.2042**  
 SONICflex Endo clean 020 gelb **1.006.2043**  
 SONICflex Endo clean 025 rot **1.006.2044**



Endodontie

### SONICflex crown extension 020 Spitze Nr. 90

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
Gummy smile  
Verletzung der biologischen Breite

Form: klein, gerade, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001  
1.011.3002

### SONICflex crown extension 020 Spitze Nr. 92

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
Gummy smile  
Verletzung der biologischen Breite

Form: klein, schräg, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005  
1.011.3006

### SONICflex crown extension 020 Spitze Nr. 91

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
Gummy smile  
Verletzung der biologischen Breite

Form: klein, schräg, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3003  
1.011.3004

### SONICflex crown extension 030 Spitze Nr. 93

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
Gummy smile  
Verletzung der biologischen Breite

Form: groß, gerade, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3007  
1.011.3008

# Chirurgie

**SONICflex crown extension 030 Spitze Nr. 94**

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
 Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
 Gummy smile  
 Verletzung der biologischen Breite

Form: groß, schräg, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3009  
 1.011.3010

**SONICflex crown extension 030 Spitze Nr. 95**

Behandlung: Chirurgische Kronenverlängerung ohne Lappenbildung zur Wiederherstellung der biologischen Breite bei:  
 Unsymmetrischen Arkadenverlauf  
 Gummy smile  
 Verletzung der biologischen Breite

Form: groß, schräg, an der Außenfläche diamantiert (D 46)



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011  
 1.011.3012

**SONICflex bone Spitze Nr. 80**

Behandlung: Durchtrennung Sharpey'scher Fasern. Aufweitung der Alveole: Entfernung von Wurzelresten; Schonende Extraktion vor Implantation; Bonesplitting

Form: Vierkant, schneidend




Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3875  
 1.006.2006

**SONICflex bone Spitze Nr. 81**

Behandlung: Präparation des knöchernen Fensters für den Sinuslift. Bei sehr massivem Knochen ggfs. rotierend die Kortikalis durchtrennen und mit der diamantierten Spitze den verbliebenen Knochen entfernen

Form: Kugel, groß, Diamantierung D 46

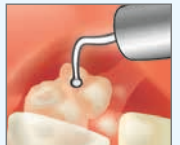

Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3876  
 1.006.2008

**SONICflex bone Spitze Nr. 83**

Behandlung: Entnahme von Knochenblöcken, Osteotomien (Distraction, Bonesplitting). Bei extrem dicker Kortikalis ggfs. rotierend vorarbeiten

Form: Säge sagittal



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
 passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3878  
 1.006.2012

Chirurgie

**SONICflex bone Spitze Nr. 84**

Behandlung: Entnahme von Knochenblöcken, Osteotomien (Distraction, Bonesplitting).  
Bei extrem dicker Kortikalis ggfs. rotierend vorarbeiten  
Form: Säge axial



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.004.3879  
1.006.2014

**SONICflex bone Spitze Nr. 85**

Behandlung: Ideal zum sicheren Ablösen der Schneider'schen Membran beim Sinuslift durch die tellerartige Form  
Form: Elefantfuß



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.006.0645  
1.007.1624

**SONICflex bone Spitze Nr. 86**

Behandlung: Ideal zur leichten und schnellen Gewinnung größerer Knochenmengen, speziell für Knochenaugmentation  
Form: Schaber



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

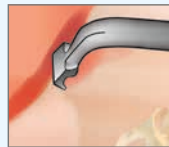

1.006.0741  
1.007.1625

**SONICflex bone Spitze Nr. 87**

Behandlung: Ideal für schmale Schnitte, zum Lösen der Ligamente  
Form: Säge axial, wechselbare Sägeblätter  
Sägeblattstärke: 0,15 mm



Bestellnummer: passend für SONICflex 2000 N / L, 2003 / L  
passend für SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS  
Sägeblatt ( 5 Stück)

1.006.1406  
1.007.1627  
1.006.1405

**Zubehör:**



Bestellnummer: Drehmomentschlüssel

1.000.4887



Bestellnummer: Steri - Kasette

0.411.9101



Bestellnummer: Schlüssel

0.411.0892



Bestellnummer: Zwischenstück zur Zufuhr medikamentöser Flüssigkeit für SONICflex 2003  
Zwischenstück zur Zufuhr medikamentöser Flüssigkeit für SONICflex 2008

1.000.6296  
1.006.5966

Chirurgie





KaVo. Dental Excellence.