

MYLUNOS® – DOPPELTE STRAHLKRAFT

FÜR PRÄVENTION UND MINIMALINVASIVE THERAPIE




LUNOS® – STRAHLENDES LÄCHELN FÜR ALLE.




Dürr Dental hat ein umfassendes System entwickelt für die Prävention zur Erhaltung der allgemeinen Mundgesundheit sowie zur minimalinvasiven Therapie von Parodontitis oder Periimplantitis. Dieses System begleitet und unterstützt alle Schritte, die Patienten, Zahnärzte und das Praxisteam während der Behandlung durchlaufen.

Die Bausteine des Systems berücksichtigen digitale Bildgebung zur Diagnose und Patientenkommunikation, Geräte und Verbrauchsmittel zum Einsatz im Rahmen eines professionellen Präventionskonzeptes sowie wirkungsvolle Hilfsmittel zur Steigerung des Patientenkomforts. Dies alles macht das Gesamtsystem von Dürr Dental effizient, schonend und wirkungsvoll – drei Eigenschaften, die Zahnärzte, Praxispersonal und Patienten gleichermaßen schätzen.

PRÄVENTIONSPROZESS

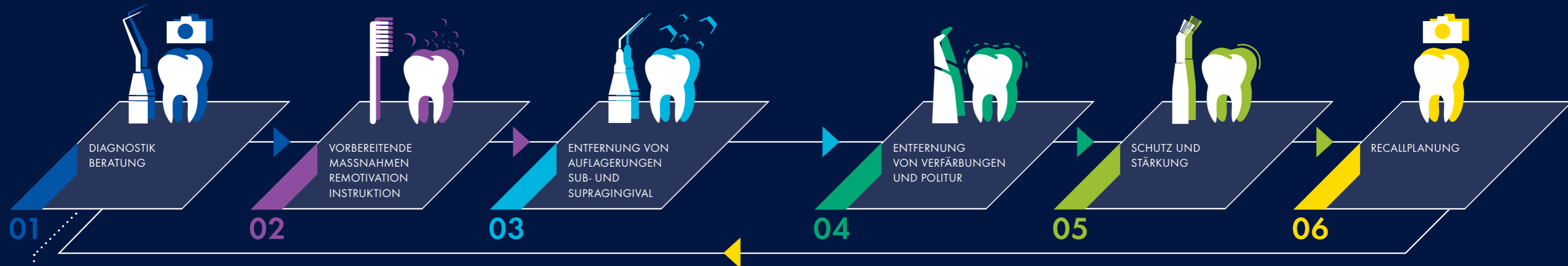


THERAPIEPROZESS

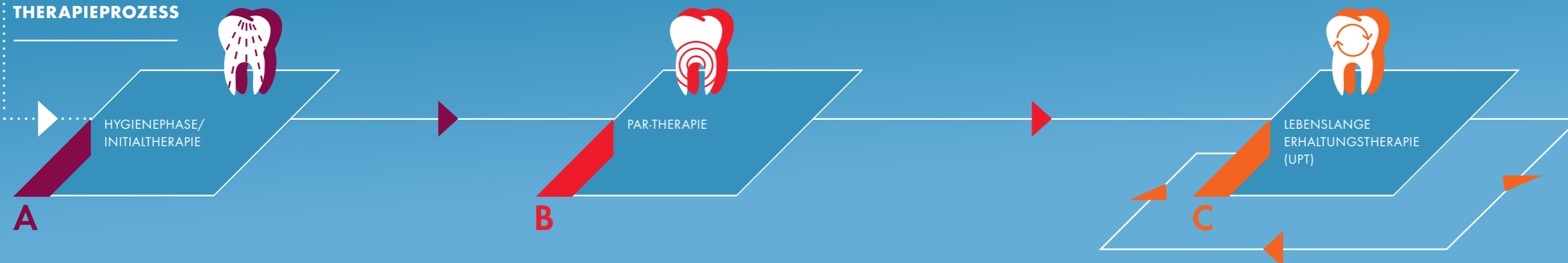


INHALTSVERZEICHNIS: ALLE LUNOS® PRODUKTE AUF EINEN BLICK

PRÄVENTIONSPROZESS

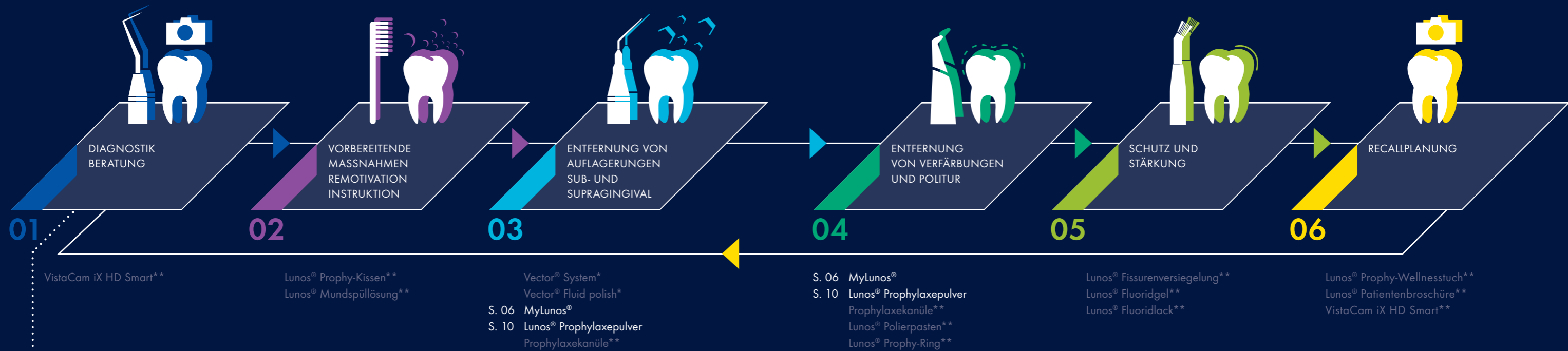

THERAPIEPROZESS

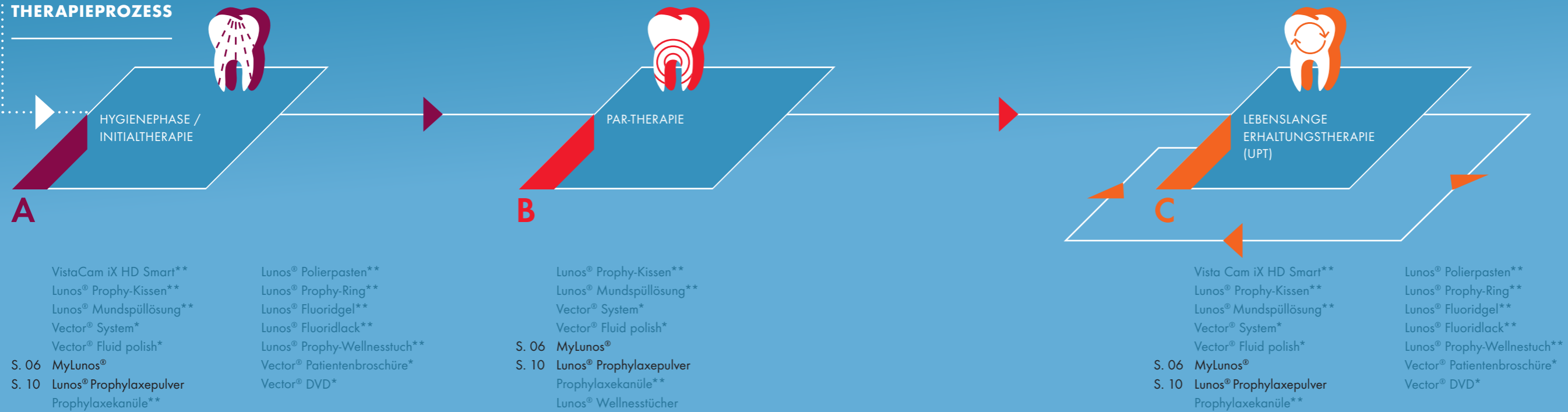

* Dieses Produkt finden Sie in der Vector® Broschüre von Dürr Dental.

** Dieses Produkt finden Sie in der System-Broschüre von Dürr Dental.

Sie erhalten diese Broschüren kostenlos bei Dürr Dental. Mehr unter www.duerrdental.com

HANDLICH, VIELSEITIG, MIT STRAHLKRAFT.

Das Pulver-Wasserstrahl-Handstück* MyLunos® unterstützt mit Leichtigkeit, Kraft und Ergonomie, wenn Verfärbungen, Ablagerungen und Biofilme beseitigt werden sollen. Je nach Düse ist es bereit für die supra- oder subgingivale Anwendung. Die abnehmbare Pulverkammer kann schnell gewechselt werden, sodass stets genau das Pulver verwendet werden kann, das erforderlich ist. Von der Vorbereitung über die Anwendung in der Behandlung bis hin zur Aufbereitung wird konsequent der Systemgedanke verfolgt. MyLunos® bietet hohe Flexibilität und Effizienz, weil als System entwickelt.

SUPRA- UND SUBGINGIVALE BEHANDLUNG

Eins für alles – das MyLunos® Pulver-Wasserstrahl-Handstück ermöglicht größte Therapiefreiheit. Ob die supragingivale Entfernung von Verfärbungen oder die subgingivale Reinigung von Wurzel- und Implantatoberflächen – durch ein schnelles Tauschen der beiden Düsen wird ein reibungsloser Behandlungsablauf ermöglicht.



PERFEKTE ERGONOMIE

Optimale Ergonomie hat viele Gründe: Gewicht, Schwerpunktlage, Material, Form, Haptik, Abmessungen. MyLunos® berücksichtigt alle. Die Oberfläche ist rutschfest, die Form ideal angepasst an die Hand. Damit bietet MyLunos® mit allen Düsen hohe Ergonomie.



WECHSELKAMMERPRINZIP

Besonders leicht zu wechseln mit dem Bajonett-Verschluss – auch während der Behandlung. Arbeitsunterbrechungen oder Leistungsabfall aufgrund geringen Füllstandes sind damit ausgeschlossen. Auch kann bedarfsorientiert mit unterschiedlichen Pulvern gearbeitet werden.



VORBEREITUNG DER BEHÄLTER

Aufgrund des sicheren Ventilverschlusses können die Behälter vorab befüllt werden. Dabei ermöglichen die cleveren Ablagen eine flexible Befüllung und Lagerung. Die Behälter sind in vier verschiedenen Farben erhältlich. Jede Farbe steht somit eindeutig für eine der vier Varianten der Lunos® Prophylaxepulver.



HANDSTÜCK UND EINZELTEILE KOMPLETT MASCHINELL AUFBEREITBAR

Die wiederaufbereitbaren Komponenten des Handstücks sind aus temperaturbeständigem Kunststoff. Und damit bequem thermodesinfizier- und autoklavierbar.



* Verfügbar für Turbinenkupplungen von KaVo, Sirona, W&H, BienAir und NSK.

MYLUNOS® SUPRA-DÜSE BEWÄHRT UND BEWEGLICH.

In der supragingivalen Reinigung hat MyLunos® seine exzellenten Eigenschaften bereits vielfach bewiesen.

Form, Durchmesser, Länge und die Haptik der Supra-Düse sind optimal angepasst an die Bedürfnisse des Anwenders. Die ergonomische Gestaltung der Düse ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und geringen Kraftaufwand. Die Supra-Düse überzeugt mit einem robusten, autoklavierbaren Material-Mix aus Kunststoff und Metall.



Fokussiertes Strahlbild mit extrem günstigem Strahlwinkel auch bei schwer zugänglichen Bereichen.



Die Supra-Düse ist um 360° drehbar. Dadurch ermöglicht sie leichte Erreichbarkeit aller Zahnflächen.



FÜR SUPRAGINGIVALE ANWENDUNGEN

Die Düsenöffnung hat einen idealen Öffnungswinkel und fokussiert den Pulverstrahl präzise auf einen großen Arbeitsbereich.

VIELE OPTIONEN FÜR DIE AUFBEREITUNG

MyLunos® Handstücke, Pulverkammern und Düsen können einschließlich aller Innenlumina manuell oder maschinell im Ultraschallbad, Autoklav, Thermodesinfektor oder in der Desinfektionswanne für den nächsten Einsatz vollständig validiert aufbereitet werden.



MYLUNOS® PERIO-DÜSE KRAFTVOLL UND KOMPATIBEL.

Das Beste, was man mit einem Spitzenprodukt machen kann, ist, seine herausragenden Eigenschaften weiterzuentwickeln. MyLunos® macht sich bereit für die subgingivale Anwendung.


Der Perio-Tip ist besonders schmal und flexibel. Mit einer Arbeitslänge von 11,7 mm bietet er sogar Zugang in tiefe Taschen > 8 mm.



Die Tiefenmarkierungen orientieren sich an der WHO-Sonde. Damit bietet die Perio-Spitze Sicherheit bei der Tiefenreinigung.



Der einheitliche, breite Strahlkegel der von einer einzigen Düsenöffnung erzeugt wird, ermöglicht eine wirkungsvolle Biofilamentfernung.

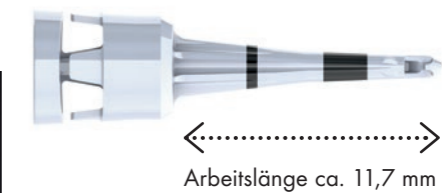

FÜR SUBGINGIVALE ANWENDUNGEN

Der Perio-Tip wird steril verpackt geliefert und kann nach der Anwendung sicher entsorgt werden.



SCHNELLER TAUSCH: PULVERKAMMER MIT ABLAGE


Die Pulverbehälter sind schnell befüll- und vorbereitbar und erlauben somit einen raschen Wechsel auch während der Behandlung. Die Pulverkammer-Ablagen runden das Lunos®-System ab. Sie bieten durchdachtes, ergonomisches Arbeiten vom Befüllen bis hin zur Lagerung der Behälter.



DIE STARKEN SANFTEN – LUNOS® PROPHYLAXEPULVER.

Seit mittlerweile 20 Jahren steht die Zahnerhaltung und der Schutz regenerativen Gewebes im Fokus der Produktentwicklungen von Dürr Dental. Bei den Lunos® Prophylaxepulvern steht die Schonung von empfindlicher Zahnschmelz bei gleichzeitig effektiver Reinigung an erster Stelle. Sie zeigen eine äußerst geringe Abrasion auf Zahnschmelz und Dentin und können so im Rahmen regelmäßiger Recallbehandlungen angewendet werden. Auf eine anschließende Politur der Oberfläche kann oftmals verzichtet werden. Das schont nicht nur Zahnschmelz sondern spart dem Anwender auch wertvolle Behandlungszeit und ermöglicht so höheren Patientenkomfort.

Die Leistung unserer Produkte wird entwicklungsbegleitend von externen Instituten überprüft. Die Ergebnisse sind in einer Wissenschaftlichen Broschüre zusammengefasst, die bei Dürr Dental erhältlich ist.

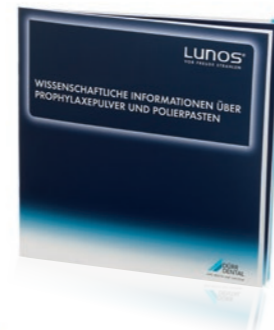

- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LAKTOSE
 - ✓ GLUTEN

LUNOS® PROPHYLAXEPULVER GENTLE CLEAN

03 / 04 / A / B / C // S. 04-05

Für die supragingivale Reinigung und Entfernung von extrinsischen Verfärbungen.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 65 µm
- nicht schleimhautreizend

Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage

Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtungen: Neutral, Orange und Spearmint

Verkaufseinheit: 4 x 180 g



- FREI VON:**
- ✓ TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN
 - ✓ LAKTOSE
 - ✓ GLUTEN

LUNOS® PROPHYLAXEPULVER PERIO COMBI

03 / 04 / A / B / C // S. 04-05

Für die subgingivale Biofilmentfernung und supragingivale Reinigung. Ideal für den Recall.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 30 µm
- nicht schleimhautreizend

Zur Unterstützung der Erhaltungstherapie*

Beste Wasserlöslichkeit:

- hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- schont die Sauganlage

Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtung: Neutral

Verkaufseinheit: 4 x 100 g

* Kruse, A. B.; Akakpo, D. L.; Maamar, R.; Woelber, J. P.; Al-Ahmad, A.; Vach, K.; Ratka-Krueger, P.: Trehalose powder for subgingival air-polishing during periodontal maintenance therapy: a randomized controlled trial. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30311948> J Periodontol.; 2018; doi: 10.1002/JPER.17-0403

VERKAUFSPAKETE UND ZUBEHÖR.

MYLUNOS® SET PRO*

Zur sanften, effektiven Entfernung von supra- und subgingivalen Auflagerungen.

Inhalt:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Düse Perio
- 8 Perio Tips
- 2 Pulverbehälter mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean und Perio Combi
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung



MYLUNOS® SET SUPRA*

Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen.

Inhalt:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung



MYLUNOS® EXTENSION-SET PERIO*

Zur Erweiterung des MyLunos® Sets Supra für die subgingivale Anwendung.

Inhalt:

- Düse Perio
- 8 Perio Tips
- Pulverbehälter in Orange mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi
- Lunos® Kombischlüssel



* Verfügbar für Turbinenkupplungen von KaVo, Sirona, W&H, BienAir und NSK.

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

