




SOOO SUPER  
MIT **FUTAR**<sup>®</sup>

**BISSREGISTRIERUNG**

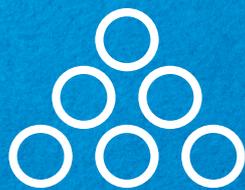

**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# FUTAR<sup>®</sup> – EINFACH BEEINDRUCKEND!

## Bissregistrierung

Die **Futar<sup>®</sup>**-Produktfamilie besteht aus sechs verschiedenen Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklussionsverhältnisse.

## SUPER IN QUALITÄT UND FORTSCHRITT

- „Made in Germany“ mit eigener Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Deutschland

## SUPER DURCH VIELSEITIGKEIT

- Wählen Sie zwischen hohen und höchsten Endhärten sowie verschiedenen Verarbeitungszeiten!

## SUPER SEIT ÜBER 20 JAHREN

- Vertrauen Sie dem Marktführer in Deutschland\*!

**Gehen Sie bei Ihrer Bissregistrierung  
keine Kompromisse ein!**



# FUTAR® – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

## Futar® Cut & Trim Fast:

- Sparsam dank der Verwendung des **kürzeren, gelben Mischers** (bis zu drei Registrare mehr pro Kartusche)
- Extra-hohe Endhärte (Shore-D 35)
- Mit Fräse und / oder Skalpell ideal zu bearbeiten
- Scanbar für den CAD/CAM-Einsatz in Ihrer Praxis!



## Futar® D / Futar® D Fast:

- Extra-hohe Endhärte (Shore-D 43)
- Bietet eine sehr gute Fräsbarkeit
- Auch als Fast-Variante verfügbar: **Für mehr Patientenkomfort!**



Die Futar®-Familie  
kann noch viel mehr:

## Futar® / Futar® Fast:

- Hohe Endhärte (Shore-A 90)
- Hart in der Abbindung, flexibel in der Bearbeitung: lässt sich sehr gut beschneiden
- Auch als Fast-Variante verfügbar: **Für mehr Patientenkomfort!**



## Futar® D Slow:

- Extra-hohe Endhärte (Shore-D 43)
- Extra-lange Verarbeitungszeit für zeitaufwendige Anwendungen, z. B. für myozentrische Bissregistrierung, Fixation von Abdruckpfosten oder die individuelle Randgestaltung
- Vielfältiger Einsatz auch im Labor: als Isoliermaterial oder zur Herstellung von Modellsegmenten



- Exakte Ergebnisse dank hervorragender Fließeigenschaften
- Geringe Elastizität vermindert das Federn bei der Modellzuordnung
- Überschussanteile können bequem abgebrochen werden

**EINFACH,  
SAUBER UND  
SCHNELL IN DER  
ANWENDUNG!**

# FUTAR® – LEISTUNG LIEGT IN DER FAMILIE

## Zahnbogen

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungszeit bei 23 °C	 Mund- verweildauer	Gesamt- abbindezeit*	 Härte (ca.) Shore
<b>Futar®</b>		30 Sek.	90 Sek.	<b>2:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® D</b>		30 Sek.	90 Sek.	<b>2:00 Min.</b>	D 43
<b>Futar® D Slow</b>		90 Sek.	3:00 Min.	<b>4:30 Min.</b>	D 43

\* Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

## Segment

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungszeit bei 23 °C	 Mund- verweildauer	Gesamt- abbindezeit*	 Härte (ca.) Shore
<b>Futar® Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® D Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	D 43
<b>Futar® Cut &amp; Trim Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	D 35

\* Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

**ERSTELLEN  
SIE IHR BISS-  
REGISTRAT IN  
NUR EINER  
MINUTE!**

# FUTAR<sup>®</sup> – DAS SORTIMENT

Futar <sup>®</sup>	Futar <sup>®</sup> Fast	Futar <sup>®</sup> D	Futar <sup>®</sup> D Fast
<b>Intro pack</b>	50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün		
<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün		
<b>Bonus pack</b>	10 x 50-ml-Kartusche, 30 Mischkanülen grün		

Futar <sup>®</sup> Cut & Trim Fast	
<b>Intro pack</b>	50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen gelb
<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen gelb
<b>Bonus pack</b>	10 x 50-ml-Kartusche, 40 Mischkanülen gelb

Futar <sup>®</sup> D Slow	
<b>Normal pack</b>	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen grün



Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de



012736\_1919

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent