



I AM
VERSATILE



AIR N GO
EASY

**Einfach sicher – doppelt gut:
der All-in-one-Airpolisher!**

AIRPOLISHING WIRD NOCH EINFACH

Bakterielle Dekontaminierung
 Frische
 Aktive Verlaufskontrolle von Parodontalerkrankungen
 Supra Perio
 Zuverlässigkeit
 Größere Bewegungsfreiheit
 Einfachheit
 Design



EINE KOMPLETTE LÖSUNG

Vier Düsen zur aktiven Verlaufskontrolle von Parodontalerkrankungen. Einfach Düse wechseln – ein Handstückwechsel ist nicht nötig.

Pulversorten für jede klinische Situation:

- „CLASSIC“-Pulver auf Basis von Natriumbikarbonat
- „PEARL“-Pulver auf Basis von Kalziumkarbonat
- „PERIO“-Pulver auf Basis von Glyzin



HER MIT AIR N GO

EASY

DOPPELTE FUNKTION

Erleben Sie die neueste Generation Airpolisher-Handys mit Doppelfunktion von ACTEON® EQUIPMENT:

- SUPRA für die prophylaktische supragingivale Politur
- PERIO für subgingivales Polieren: Prävention sowie Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis

Dieses zahnmedizinische Produkt verbindet Einfachheit mit Leistungsstärke.



EIN HANDSTÜCK

Ein Handstück für verschiedene Pflegebehandlungen

AIR-N-GO® easy kombiniert essentielle Funktionen mit einer hohen Zuverlässigkeit und erleichtert Ihnen somit den Praxisalltag enorm:

- Schnelles Einschalten: Direktverbindung zum Highspeed-Handstückanschluss
- Größere Bewegungsfreiheit: 360°-Drehung; schnelle und zielgenaue Behandlung pflegebedürftiger Zahnflächen
- Einfachere Reinigung des Handstücks durch leichtes Auseinandernehmen

IHRE PARTNER BEI DER VORBEUGUNG BEKÄMPFUNG VON PARODONTALERKR

Durch modernste Modellierertechniken in der Fluidodynamik konnten Düsen geschaffen werden, die einen kontinuierlichen, zielgenauen und kontrollierten Sprühwasserstrahl erzeugen – und zwar punktgenau dort, wo Sie ihn benötigen.

Im Praxisalltag lassen sich mithilfe der leistungsstarken AIR-N-GO®-Düsen supra- und subgingivale Biofilme wirksam entfernen.

AIR-N-GO® SUPRA- DÜSE (Standard)



- Bewährte Lösung für die supragingivale Prophylaxe in Kombination mit den AIR-N-GO®-Pulversorten „CLASSIC“ oder „PEARL“
- Garantiert eine schnelle, effiziente Behandlung mit höherem Arbeitskomfort




Klinischer Fall Dr. P. ROUAS (Frankreich)

AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE- DÜSE (Optional)



- Reduzierter Verbrauch von feinteiligem AIR-N-GO® „PERIO“-Pulver in der Erhaltungsphase
- Mukositis-Behandlung für eine klinisch gesunde Mundschleimhaut
- Wirksame Bekämpfung von fortschreitenden Parodontalerkrankungen

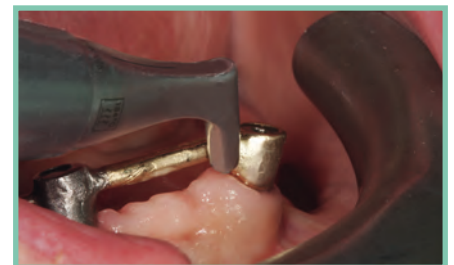


Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

UND ANKUNGEN



AIR-N-GO® PERIO EASY- DÜSE

(Optional
PERIO easy kit)

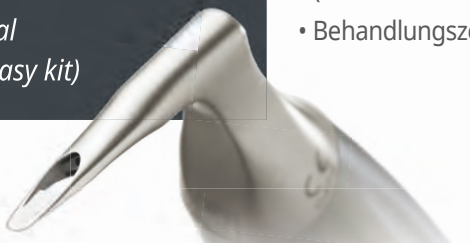

- Innovatives „Schuhlöffel“-Design zum einfachen subgingivalen Einführen
- Ein echter Pluspunkt bei der nicht-operativen subgingivalen Zahn- und Implantatbehandlung (3 bis 8 mm tiefe Zahnfleischtaschen)
- Behandlungszeit pro Fläche nur 5 Sekunden



Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

AIR-N-GO® PERIO- DÜSE

(Optional)



- Operative und nicht-operative subgingivale Behandlungen (Tunnelierung und Lappen)
- Doppelter seitlicher Sprühwasserstrahl mit hoher Leistungsstärke
- Dekontaminierung tiefer Zahnfleischtaschen (8 bis 10 mm)



Klinischer Fall Dr. A. PATEL (U.K.)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR

AIR-N-GO®-Pulver wurden speziell für die wirksame und gleichzeitig sanfte Behandlung von Zahnoberflächen entwickelt und getestet. Alle Pulver sind mit dem AIR-N-GO® easy-Handstück kompatibel, sodass kein Instrumentenwechsel erforderlich ist.

AIR-N-GO® CLASSIC-PULVER


auf Basis von
Natriumbikarbonat
($\approx 76\mu\text{m}$)

- **Verschiedene Geschmackssorten** – je nach Vorliebe Ihrer Patienten
- Behutsame Reinigung mit sofort sichtbaren Ergebnissen
- Wirksames Entfernen von Verfärbungen und bakterieller Plaque, selbst an schwer zugänglichen Flächen
- Verbesserte Behandlungsakzeptanz: geringere Blutungen, weniger Schmerzen für den Patienten



5 frische Geschmacksrichtungen auf Basis von 100 % natürlichen Aromen oder ätherischen Ölen:
Neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminze oder Zitrone


MITBEWERBERPRODUKT

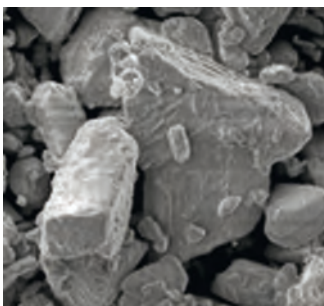


Geschichtete Partikel mit aggressiver Geometrie (x1000)



Behandelter Zahnschmelz weist zahlreiche Kratzer auf (x300)

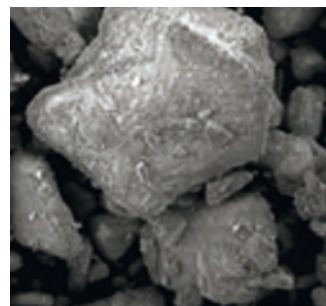

Partikel mit weicherer Geometrie (x1000)

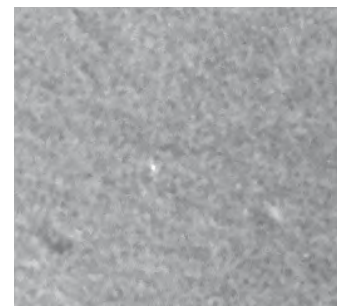

Behandelter Zahnschmelz: die Oberfläche weist keine Kerben oder Kratzer auf (x300)

AIR N GO

JEDE KLINISCHE ANFORDERUNG


AIR-N-GO® PEARL-PULVER

auf Basis von natürlichem
Kalziumkarbonat
($\approx 55\mu\text{m}$)



- Ultra-aktive supragingivale Politur und **Schutz von empfindlichem Gewebe**
- Verringerung der Übersäuerung infolge von Gewebsentzündungen für eine klinisch gesunde Mundflora
- Wiederherstellung des natürlichen Perlmutterglanzes des Zahnschmelzes
- Rasche und sichere Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen und Verbundstoffen

Selbst die schmerzempfindlichsten Patienten mit fortgeschrittener Zahnfleischentzündung profitieren von der Behandlung mit „PEARL“.

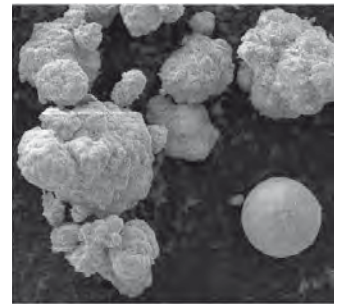

AIR-N-GO® "PEARL" (x1000)

Quelle: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) Fotos S.E.M.

AIR-N-GO® PERIO-PULVER


auf Basis von natürlichem
Glyzin
($\approx 25\mu\text{m}$)



- **Einsatz ausschließlich zur subgingivalen Therapie** in Ergänzung zur Erstbehandlung
- Optimaler Erhalt der behandelten Oberflächen (Zähne und Implantate) und empfindlicher Bereiche durch die geringe Abrasivität
- Verhindert die Zunahme des subgingivalen Biofilms

Einzigartige Eigenschaften und zahlreiche Vorteile:

- Plaqueentfernung in der parodontalen Erhaltungsphase an freigelegten Wurzeloberflächen ohne Substanzverlust
- Reduktion der Bakterienlast in den Zahnfleischtaschen

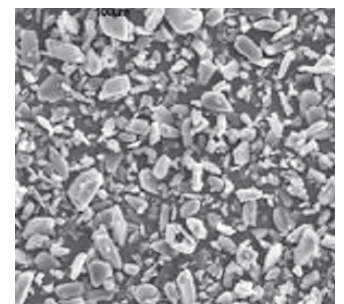

AIR-N-GO® "PERIO" (x1000)

Quelle: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) Fotos S.E.M.

AIR N GO








EASY



PUBLICIS ACTIV 0052059

GO SUPRA

GO PERIO
Zähne und Implantate

Düsen	Pulver	Indikationen
 <p>AIR-N-GO® EASY SUPRA 120° Im Lieferumfang enthalten</p>	 <p>„CLASSIC“ Auf Basis von Natriumbikarbonat Durchschnittliche Partikelgröße: 76µm GESCHMACKSORTEN: Neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminz und Zitrone</p>	<p>Nachbearbeitung im Anschluss an die Zahnsteinentfernung Vorbereitung für die Zahnweißung Reinigung von Interdentalräumen, Fissuren und Rissen Vorbereitung der Zahnoberfläche für das Ätzen Reinigung von Zahnsparren Entfernen von supragingivalen Biofilmen, Plaque, Verfärbungen und provisorischen Zementresten</p>
	 <p>„PEARL“ Auf Basis von Kalziumbikarbonat Durchschnittliche Partikelgröße: 55µm GESCHMACK: Neutral</p>	
 <p>AIR-N-GO® PERIO EASY Wird mit dem optionalen PERIO-Kit geliefert</p>	 <p>„PERIO“ Auf Basis von Glyzin Durchschnittliche Partikelgröße: 25µm GESCHMACK: Neutral</p>	<p>Entfernung von subgingivalem Biofilm Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis Taschentiefe: 3 – 8 mm</p>
 <p>AIR-N-GO® PERIO Optional</p>		<p>Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis Taschentiefe: 8 – 10 mm</p>
 <p>AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Optional</p>		<p>Parodontale Erhaltungsphase Taschentiefe: bis zu 4 mm</p>

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.de.acteongroup.com



VERKAUFSANGEBOT

Standard

AIR-N-GO® easy-Koffer: AIR-N-GO® easy-Handstück mit modellabhängigem Adapter (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1x SUPRA 120° Düse, 1x Kennenlernkit mit 10x „CLASSIC“-Pulversticks in verschiedenen Geschmacksrichtungen und 2x „PEARL“-Pulversticks, 1x AIR-N-GO® easy-Kit zur Instandhaltung und Pflege

*KaVo, Sirona, Bien-Air, W&H und Midwest sind eingetragene Warenzeichen.

Optional

PERIO easy-Kit: AIR-N-GO® PERIO easy-Düse und 1x Flasche mit 160 g AIR-N-GO® „PERIO“-Glyzinpulver
Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO-Düse
Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO Maintenance-Düse

ACTEON® Germany GmbH | Industriestraße 9 | 40822 Mettmann
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 | Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com | www.de.acteongroup.com

SATELEC® S.A.S. | A Company of ACTEON® Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCE
Tel.: +33 (0) 556 340 607 | Fax: +33 (0) 556 349 292
E-Mail: info@acteongroup.com | www.acteongroup.com



Ref. D10233 - W4-11/2016 - DE0217 - Copyright © 2015 SATELEC. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Ohne die Erlaubnis von SATELEC ist die Reproduktion oder Versendung von Informationen aus diesem Dokument oder Teilen dieses Dokumentes in jeglicher Form untersagt. Die deutsche Übersetzung dieses Prospektes dient lediglich der Information. Im Fall von Abweichungen der deutschen Übersetzung vom französischen Original hat das französische Original Vorrang.