

CS 7200

Der ideale digitale Begleiter im Behandlungszimmer

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Kompaktes System mit ruhigem Betrieb – ideal für die Verwendung im Behandlungszimmer
- Erschwingliches System ohne Kompromisse bei der Bildqualität
- Schneller, optimierter Workflow, bei dem keine Klicks erforderlich sind
- Ideal für alltägliche intraorale Anwendungen (Folienformat 0, 1, 2)



Einfacher Workflow mit 3 Schritten

Belichten, Scannen, Anzeigen


- Der Workflow wurde maximal vereinfacht.
- Die Bildaufnahme erfolgt direkt in der Bildbearbeitungssoftware.
- In der Software müssen vor dem Scannen der Folie keine Klicks ausgeführt werden.



1 Patientenbild wird auf der Speicherfolie erfasst.



2 Speicherfolie wird in nur einem Schritt eingescannt und gelöscht. Die Speicherfolie kann wiederverwendet werden.

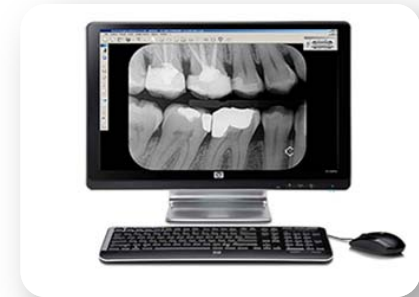

3 Bild wird innerhalb weniger Sekunden angezeigt, keine Klicks erforderlich.


Schnelle und einfach

- Es dauert gerade einmal acht Sekunden, bis das erste Bild angezeigt werden kann.
- Der Scanner liest die Folie nicht, wenn sie verkehrt herum eingelegt ist.
- Speicherfolien werden nach jedem Scan automatisch gelöscht
- Drei Scanmodi zur Priorisierung von Geschwindigkeit oder Auflösung



Filmähnliche Speicherfolien

Genauso leicht zu positionieren wie ein Film

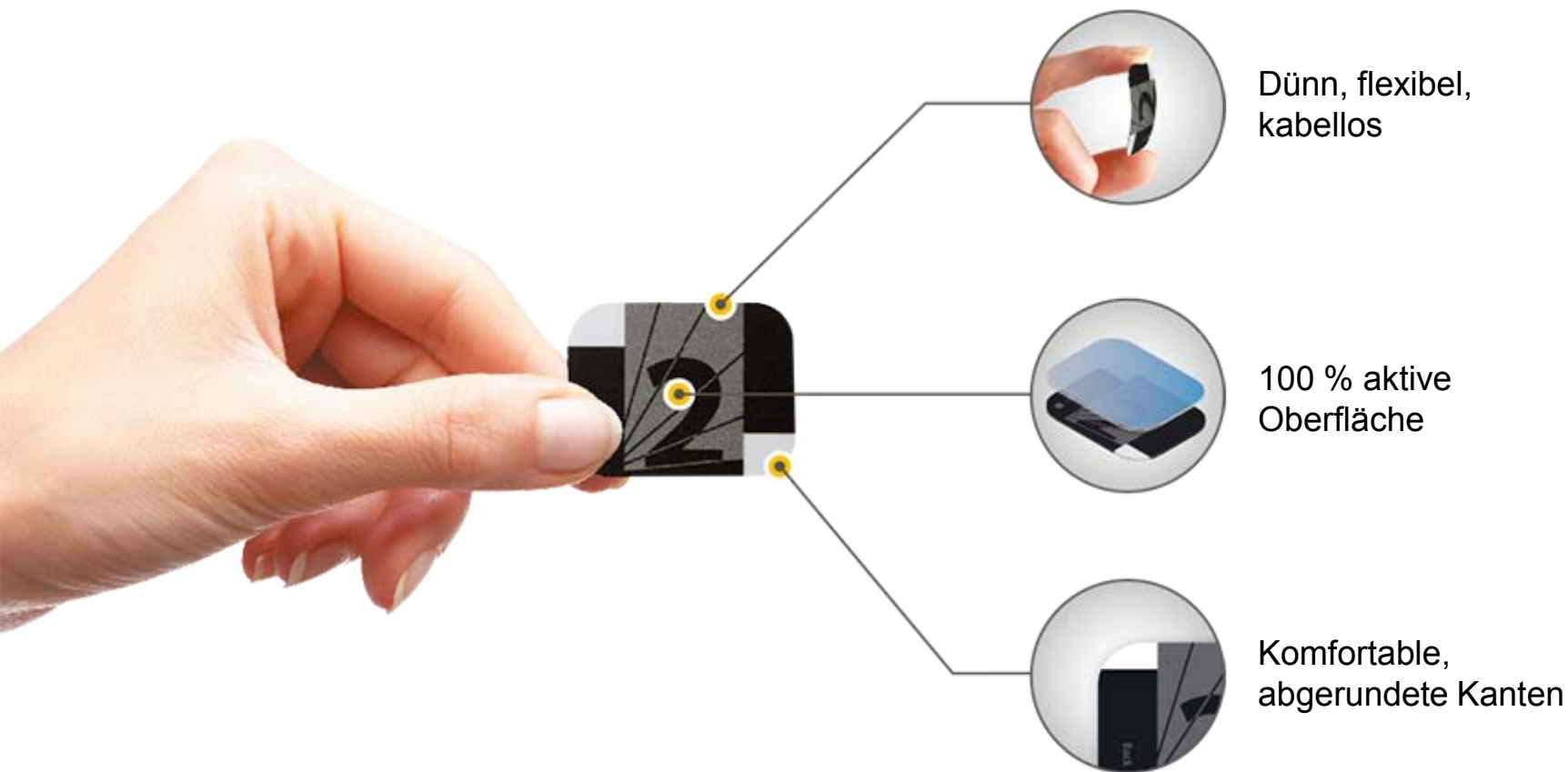

Keine Kompromisse hinsichtlich Bildqualität

Zuverlässige Diagnosen

- Tatsächliche Auflösung bis zu 17 LP/mm
- Liefert konstant hochwertige Bilder
- Großer Dynamikumfang senkt das Risiko von Unter- und Überbelichtung



Welches System ist für Sie das richtige?

Kurzvergleich der Funktionen



	CS 7200	CS 7600
Verwendung	Im Behandlungszimmer/Einzelnher Benutzer	Gemeinsame Verwendung im Netzwerk/ Mehrere Benutzer
Theoretische Auflösung (max.)	25 LP/mm	25 LP/mm
Tatsächliche Auflösung (max.)	17 LP/mm	17 LP/mm
Kassettenformate	0-1-2	0-1-2-3-4
Untersuchungen	Pädiatrisch – Periapikal – Bissflügel	Pädiatrisch – Periapikal – Bissflügel Langer Bissflügel – Tatsächlich okklusal
Zeit bis zum ersten Bild	8 Sek.	5 Sek.
LCD-Bildschirm mit Benutzeranweisungen	-	✓

CS 7200

Technische Daten

Theoretische Auflösung (max.)	25 LP/mm
Theoretische Auflösung (max.)	17 LP/mm
Speicherfolienformate (Höhe x Breite)	Größe 0 – 22 mm x 35 mm Größe 1 – 24 mm x 40 mm Größe 2 – 31 mm x 41 mm
Löschvorgang	Automatisch
Scandauer	Lediglich 8 Sekunden für ein Bild
Konnektivität	USB
Netzteil	100–240 V (AC), 50/60 Hz, 1,2 A
Systemabmessungen (B x H x T)	130 x 270 x 300 mm 5,1 x 10,6 x 11,8 Zoll
Gewicht	3,5 kg

