



HS IONENAUSTAUSCHER-SETS

Mit unseren hochwertigen Ionenaustauscher-Sets sind Sie bestmöglich für die Herstellung von vollentsalztem Reinwasser zur Speisung Ihrer Reinstwasser-Systeme wie Thermodesinfektoren, Sterilisatoren oder Autoklaven ausgestattet.



HS BASIC



HS ADVANCED



HS PREMIUM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art.-Nr 9084897

HS BASIC

Das Set enthält alle Komponenten für den Anschluss eines herstellerunabhängigen Gerätes (z.B. Thermodesinfektor)

- unkomplizierter Anschluss an das Stadtwassersystem für die sofortige Inbetriebnahme
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufes durch Ersatz Ionenaustauscher-Patrone für den Zeitraum der Regeneration
- nachhaltige und ökologische Lösung durch Regeneration des Harzes



2 x Patrone DIA 2800 MB VA

Ionenaustauscher-Patronen DIA 2800 aus hochwertigem Edelstahl gefüllt mit regenerierfähigem Mischbettharz zur Erzeugung von vollentsalztem Reinwasser mit einer Leitfähigkeit von ca. 0,1 µS/cm.



2 x Panzerschlauch EPDM

Überwurf ¾" L 1,5 m
Art.-Nr. 1058682



1 x Rückflussverhinderer

¾" gemäß EN 1717
Art.-Nr. 811928

DIA 2800 MB

Material

VA Edelstahl

Gesamt-Kapazität

bei 10° Gesamt-Salzgehalt und einer Grenzleitfähigkeit von 20 µS/cm (Liter)

2800

VE-Wasserleistung (l/h)

950

Anschluss (Eingang/Ausgang)

R ¾" AG

Druckbelastbarkeit (bar)

10

Höhe (mm)

560

Durchmesser (mm)

240

Gewicht (kg)

20

Harzinhalt (l)

20

Artikelnummer

876149



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art.-Nr 812395

HS ADVANCED

Das Set eignet sich für den Anschluss von bis zu drei herstellerunabhängigen Geräten (z.B. Thermodesinfektor oder Sterilisator)

- unkomplizierter Anschluss an das Stadtwassersystem für die sofortige Inbetriebnahme
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufes durch Ersatz Ionenaustauscher-Patrone für den Zeitraum der Regeneration
- nachhaltige und ökologische Lösung durch Regeneration des Harzes



2 x Patrone DIA 2800 MB VA

Ionenaustauscher-Patrone DIA 2800 aus hochwertigem Edelstahl gefüllt mit regenerierfähigem Mischbettharz zur Erzeugung von vollentsalztem Reinwasser mit einer Leitfähigkeit von ca. 0,1 µS/cm.

DIA 2800 MB

Material	VA Edelstahl
Gesamt-Kapazität bei 10° Gesamt-Salzgehalt und einer Grenzleitfähigkeit von 20 µS/cm (Liter)	2800
VE-Wasserleistung (l/h)	950
Anschluss (Eingang/Ausgang)	R ¾" AG
Druckbelastbarkeit (bar)	10
Höhe (mm)	560
Durchmesser (mm)	240
Gewicht (kg)	20
Harzinhalt (l)	20

Artikelnummer

876149



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



2 x Panzerschlauch EPDM

Überwurf ¾" L 1,5 m
Art.-Nr. 1058682



1 x Panzerschlauch EPDM

Überwurf ¾" L 2,5 m
Art.-Nr. 1074218



1 x Rückflussverhinderer

¾" gemäß EN 1717
Art.-Nr. 811928



1 x 3er Verteilerbalken

mit Kugelhahn
Art.-Nr. 1058681 (Kugelhahn)
Art.-Nr. 875454 (Verteiler)



1 x PE Schlauch

Ø 6 mm, 3 Meter Stück,
mit Anschlussverbinder für DAC R ¾"
Art.-Nr. 1074220 (PE Schlauch)
Art.-Nr. 879404 (Anschlussverbinder)

Art.-Nr 9084898

HS PREMIUM

Das Set eignet sich für den Anschluss von bis zu drei herstellerunabhängigen Geräten (z.B. Thermodesinfektor oder Sterilisator). Für Geräte mit hohen Anforderungen an die Wasserqualität (z.B. DAC) wird zusätzlich die DIA 600 nachgeschaltet.

- unkomplizierter Anschluss an das Stadtwassersystem für die sofortige Inbetriebnahme
- Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufes durch Ersatz Ionenaustauscher-Patrone für den Zeitraum der Regeneration
- nachhaltige und ökologische Lösung durch Regeneration des Harzes
- mit dem Einsatz der zusätzlichen Ionenaustauscherpatrone DIA 600 wird die Standzeit der vorgeschalteten DIA 2800 erheblich verlängert



2 x Patrone DIA 2800 MB VA 2 x Patrone DIA 600 MB GFK

Ionenaustauscher-Patronen DIA 2800 aus hochwertigem Edelstahl und DIA 600 aus Glasfaserkunststoff gefüllt mit regenerierfähigem Mischbettharz zur Erzeugung von vollentsalztem Reinwasser mit einer Leitfähigkeit von ca. 0,1 µS/cm.



2 x Panzerschlauch EPDM
Überwurf ¾" L 1,5 m
Art.-Nr. 1058682



1 x Panzerschlauch EPDM
Überwurf ¾" L 2,5 m
Art.-Nr. 1074218



1 x Rückflussverhinderer
¾" gemäß EN 1717
Art.-Nr. 811928



1 x 3er Verteilerbalken
mit Kugelhahn
Art.-Nr. 1058681 (Kugelhahn)
Art.-Nr. 875454 (Verteiler)



1 x PE Schlauch
Ø 6 mm, 3 Meter Stück,
mit Anschlussverbinder für DAC R ¾"
Art.-Nr. 1074220 (PE Schlauch)
Art.-Nr. 879404 (Anschlussverbinder)

	DIA 2800 MB	DIA 600 MB
Material	VA Edelstahl	GFK
Gesamt-Kapazität bei 10° Gesamt-Salzgehalt und einer Grenzleitfähigkeit von 20 µS/cm (Liter)	2800	600
VE-Wasserleistung (l/h)	950	400
Anschluss (Eingang/Ausgang)	R ¾" AG	R ¾" AG
Druckbelastbarkeit (bar)	10	6
Höhe (mm)	560	390
Durchmesser (mm)	240	170
Gewicht (kg)	20	6
Harzinhalt (l)	20	5
Artikelnummer	876149	826024



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR & SERVICE

Leitwertüberwachung



Leitfähigkeitsmessgerät C900

- hochpräzise digitale Leitfähigkeits- und Temperaturmessung
- breites Messspektrum von 0,056 - 100 µS/cm
- frei einstellbare Grenzwerte und akustisches sowie optisches Signal bei Überschreitung
- zur Wandmontage geeignet

Art.-Nr. 876153



Leitfähigkeitsmessgerät C50

- einfache und präzise Leitfähigkeitsüberwachung für permanente Qualitätskontrolle
- analoge Messung im Bereich von 0 - 50 µS/cm
- Montage erfolgt direkt auf dem Ionenaustauscher

Art.-Nr. 876152

Armaturen und Verschlüsse



Entnahmepistole

- zur manuellen Entnahme von Rein- und Reinstwasser
- aus Kunststoff inkl. Edelstahlschlauch ¾" 1,5 m

Art.-Nr. 879401



Schnellverschluss-Set HS BASIC / ADVANCED

- Einfacher und sicherer Patronenanschluss & -wechsel
- bestehend aus 6 x Vater- & 3 x Mutterteil

Art.-Nr. 823126



Schnellverschluss-Set HS PREMIUM

- Einfacher und sicherer Patronenanschluss & -wechsel
- bestehend aus 6 x Vater- & 3 x Mutterteil

Art.-Nr. 9084899

Sicherheits- & Schutzvorrichtungen



Leckagesensor

- Einheit zum wirkungsvollen Schutz vor Wasserschäden durch integriertes Magnetventil mit Abschaltautomatik
- Einschließlich Steuerung, R ¾" Magnetventil und Sensor mit 5 m Kabel.


Art.-Nr. 876262



Harzfänger

- zur Verhinderung von Harzdurchbrüchen
- aus Edelstahl, R ¾"

Art.-Nr. 9093188

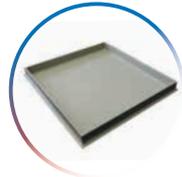

Bodenwanne

- Auffangschutz im Leckagefall
- aus PP, 550 x 500 x 50 mm

Art.-Nr. 9093189

UV-Desinfektion



- Keine Verwendung von Chemikalien oder quecksilberbasierten Lampen
- Austauschbares, integriertes UV-LED Lampenmodul mit stabilisierter UV-C Ausgangsleistung
- Externe Anzeige des Lampenbetriebs und Alarmzustände
- Remote Start / Stop Betrieb mit unbegrenzten Zyklen pro Tag

Art.-Nr. 876150

Regenerationservice



Regenerationservice für Ionenaustauscher

- wirtschaftlicher und nachhaltiger Betrieb durch eigene Regenerationsanlage
- Abholung und Austausch erschöpfter Patronen – direkt am Einsatzort
- Schnelle und effiziente Abwicklung dank deutschlandweiter Servicestandorte
- unkomplizierte Beauftragung unter regeneration@henryschein.de

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastr. 2a
63225 Langen
FreeCall 0800 140 00 44
FreeFax 0800 4000 44
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de. Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.

Erfolg verbindet.